


MEYRA[®]
medical

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

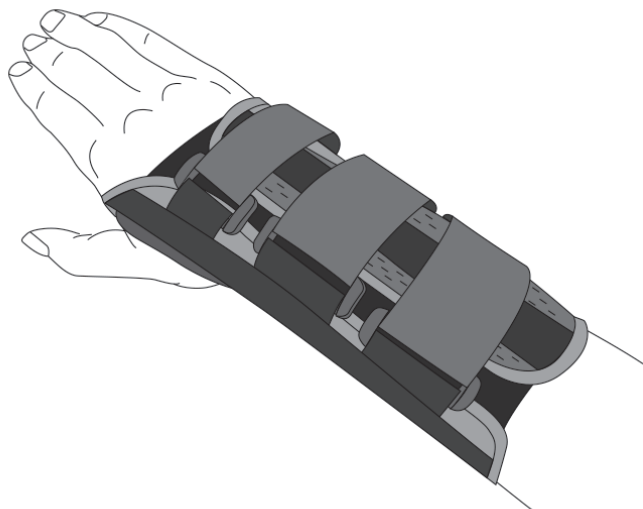

VERSA **FIT**[™]

ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ IFU

KATALOGOVÉ ČÍSLO MQC2E

CE

Indikace:

Léčba poranění zápěstí a distálního předloktí. Nestabilita zápěstí se syndromem bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření. Ochrana zápěstí ve sportu nebo rizikových povoláních (přetížení).

Kontraindikace:

Případy vyžadující imobilizaci zápěstního kloubu, např. zkřivení distálních částí kosti předloktí nebo kostí zápěstí.

POZOR!



Pomůcka by měla být používána pouze jedním pacientem. Pokud nastanou potíže s nasazením nebo použitím ortézy, kontaktujte kvalifikovaný zdravotnický personál.

Údržba:

Ortézu lze po odstranění hliníkové části umýt ručně s pomocí velmi jemných čistících prostředků při teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat a před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla, v rozloženém stavu.

Pokyny pro aplikaci:

1. Zasuňte ruku do ortézy a zasuňte palec do otvoru pro palec.
2. Umístěte spodní přední okraj ortézy pod palmární záhyb.
3. Provlékněte očka pásků skrz D-kroužky.
4. Jemně zatáhněte za pásky, dokud nebude ortéza napnutá, a panel Versa Fit se automaticky přizpůsobí velikosti ruky uživatele. Proximální pásek (A) uzamkne panel do funkční velikosti.
5. Konečná aplikace.

POZNÁMKA: Vyvarujte se přílišnému utahení ortézy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pásek nastavíte ještě jednou nebo vícekrát, podle potřeby.






POZOR!



Pokud se zvětší otok nebo pozorujete bolesti, necitlivost nebo podráždění pokožky, přestaňte ortézu používat. Okamžitě kontaktujte poskytovatele zdravotní péče. Tento výrobek je pouze podpůrným zařízením, nepoužívá se, aby se zabránilo zranění nebo jako prevence.

Velikost:

Velikost	Obvod zápěstí
XS	< 9 cm
Standard	9-25 cm
XL	> 22 cm

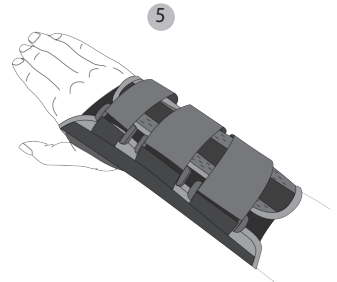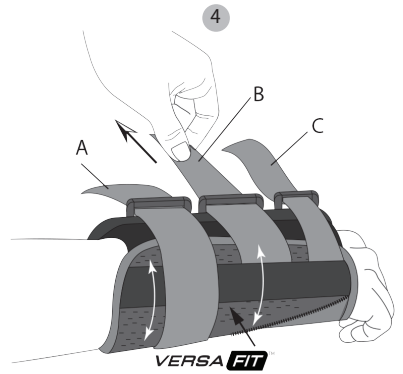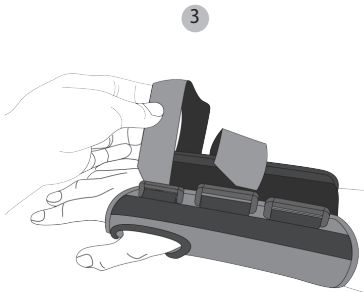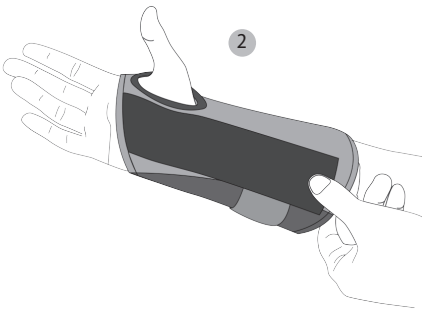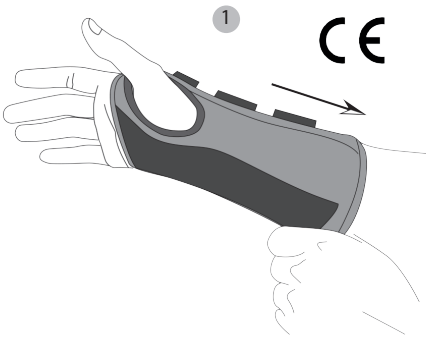



**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz