

Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



AeroStab

ORTÉZA NA KOTNÍK

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQ10P



Indikace:

Léčba poranění kotníku: podvrtnutí I° a II°, poškození vazů. Stabilizace v případě trvalé nebo dočasné nestability kotníku. Ochrana proti nadměrné everzi a inverzi. Obvyklé podvrtnutí kotníku. Prevence úrazů a přetížení.

Kontraindikace:

Nestabilní zlomeniny vyžadující zpevnění s pomocí sádry. Výrobek je určen k nošení přes bavlněnou ponožku. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s používáním produktu kontaktujte svého lékaře. Pacienti se sníženým příívodem krve do končetin, např. s diabetem nebo onemocněním periferních cév, musí být mimořádně opatrní. Nenoste ortézu přes otevřené rány.

POZOR!



Konečné rozhodnutí o použití a výběru pomůcky musí učinit váš lékař nebo odborník.

Výběr a použití:

1. Aby bylo možné správně zvolit velikost ortézy, změřte obvod chodidla v ponožce u zánártí a nártu. Nesprávná volba velikosti může snížit účinnost ortézy.
2. Vložte nohu do ortézy tak, aby se pata usadila v otvoru pro ni určeném. Umístěte jazyk pohodlně, aby netlačil na hřbet nohy a aby byl kotník chráněn před vázáním.
3. Zavažte ortézu jako normální obuv.
4. Ved'te stabilizační pásek ze středu na horní část chodidla, poté jej obtočte kolem kotníku a upevněte nad středem kotníku. Stejně ved'te stabilizační pásek z boční strany. Sílu stabilizace lze upravit správným napnutím pásků.
5. Zkuste pohnout nohou a zkontrolujte, zda těsnost ortézy poskytuje dostatečnou stabilitu. V případě potřeby zavažte ortézu ještě jednou, abyste dosáhli maximálního pohodlí a správného stabilizačního tlaku.

Údržba:

Před praním je třeba odstranit vložky z nerezové oceli. Vázání je třeba prát samostatně (ručně). Ortézu lze prát ve studené teplotě (30 °) s jemným čisticím prostředkem, bez použití tekutých aviváží. Nepoužívat bělicí a silné čisticí prostředky. Ortézu položte na ručník, rozprostřete ji a nechte sušit na vzduchu. Neždímat. Nesušit v sušičce nebo na topném tělese. Po každém praní zkontrolujte stav ortézy.

POZOR!




Nedodržování správné osobní hygieny nebo nesprávné použití čisticích prostředků může způsobit oděrky nebo jiné problémy související se zvýšeným pocením a šířením bakterií.

Tabulka velikostí:

Velikost	Obvod chodidla (dle nártu a zánártí)
S	27-30 cm
M	30-33 cm
L	33-36 cm

Jak ortézu nasadit:

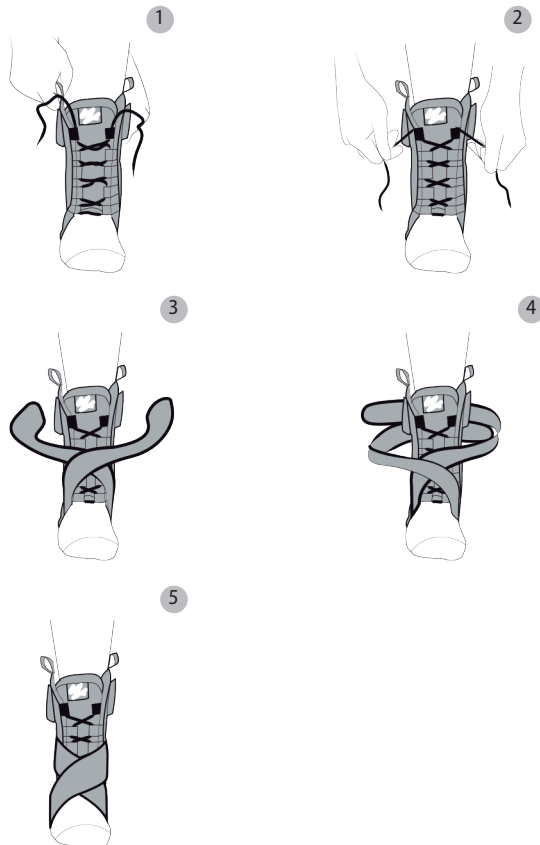



**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz