

**Qmed<sup>®</sup>**  
**Kids**



**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



***Kid Manu Universal***

**ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE**

**KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3F**



***Kid Manu Universal Long***

**ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE LONG**

**KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3G**



**CE**



**Indikace:**

Léčba poranění zápěstí a palce a distálního předloktí, chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření, ochrana zápěstí a palce při sportu.

**Indikace (Long):**

Léčba poranění zápěstí a palce a distálního předloktí, chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření, ochrana zápěstí a palce při sportu.

**POZOR!**

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití by měl ortézu nasadit zkušený zdravotnický personál. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

**POZOR!**

Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čistícími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte prosím hřejivou mast.

**Jak ortézu nasadit:**

1. Pro snazší aplikaci nastavte popruhy na nejuvolněnější nastavení.
2. Nasuňte univerzální ortézu na palec.
3. Zasuňte ruku do ortézy a opatrně zasuňte palec do otvoru podpěry pro palec.
4. Upravte ortézu tak, aby seděla těsně.

**Údržba:**

Ortézu lze po odstranění hliníkových výtuh umýt ručně s pomocí velmi jemných čistících prostředků při teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat a před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla.


Sušit v rozloženém stavu. Nesušit v sušičce na prádlo.

**Velikost**

Univerzální

**ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.**



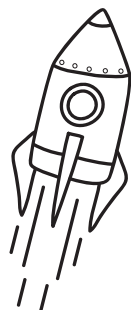

  
mdh

SPRZĘT  
MEDYCZNY

**Výrobce:**

mdh sp. z o.o.  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

MEYRA ČR s.r.o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)