

NÁVOD K POUŽITÍ

Postelové madlo


Kód produktu: GripTim



1. Vlastnosti

Postelové madlo je vyrobeno z odolné oceli s práškovým nástřikem. Má výškově nastavitelné nohy, pěnovou rukojeť, popruh k upevnění k posteli a malou kapsu.

Sada obsahuje: střední části rámu (2 ks), spodní rám s popruhem, nohy s koncovkami (2 ks), tašku, spojku středního rámu, zajišťovací sponu (2 ks), horní rám s rukojetí.

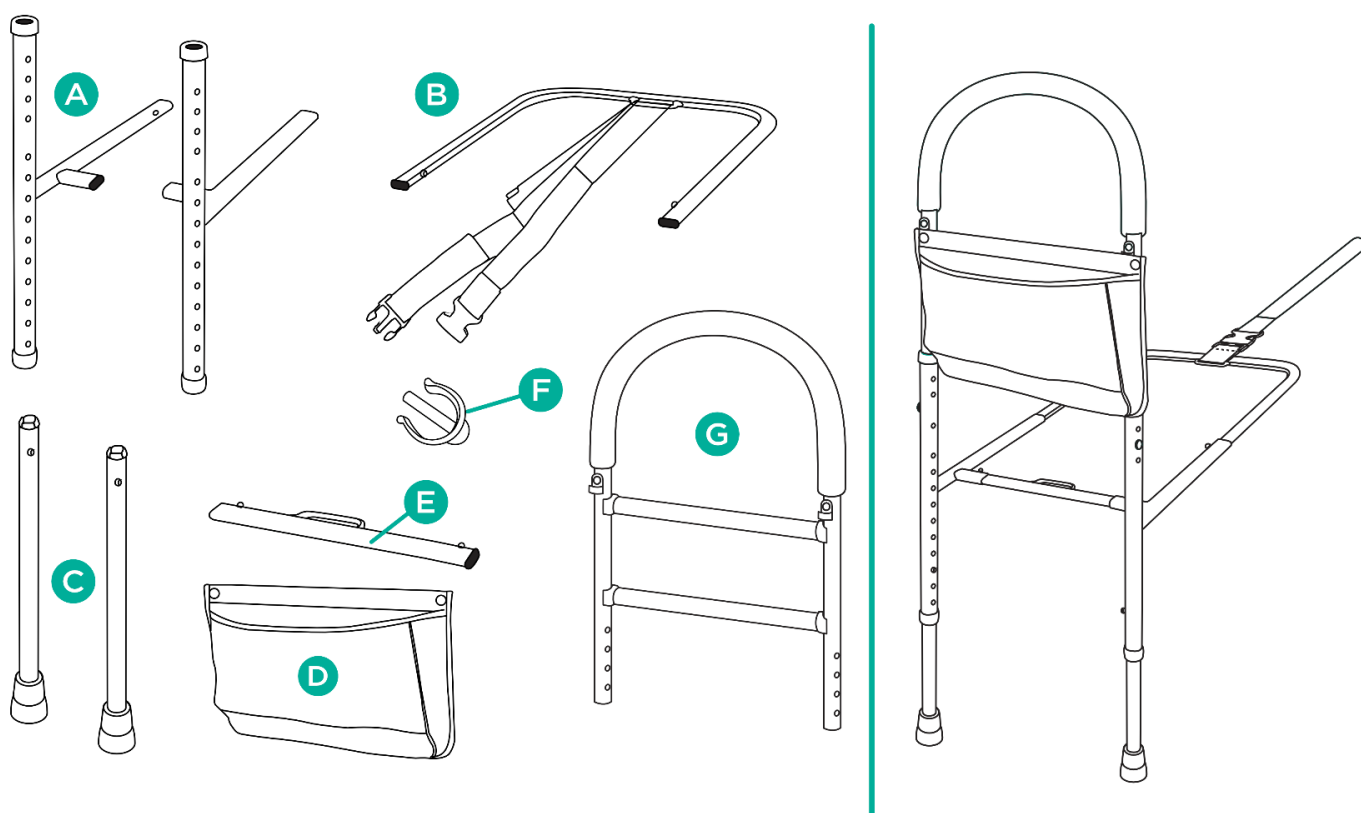

Součásti zábrany:

- | | |
|---|--|
| A. Střední části rámu s možností | E. Spojka středního rámu |
| B. Spodní rám s upevňovacím popruhem | F. Zajišťovací kolík pro nastavení výšky rukojeti |
| C. Nohy s gumovými koncovkami | G. Horní rám s pěnovou rukojetí |
| D. Taška | |

2. Účel použití

Postelové madlo je určeno jako opora při vstávání nebo přechodu z lehu do sedu na posteli. Madlo je doporučeno pro osoby se sníženou pohyblivostí, které mají

obtíže při samostatném vykonávání běžných denních činností. Madlo lze používat jak v domácím prostředí, tak i ve zdravotnických zařízeních.

3. Montáž


Krok 1. Spojte střední části rámu (A) se spojkou středního rámu (E) pomocí zajišťovacích kolíků.

Krok 2. Připojte spodní rám (B) ke střednímu rámu (A) pomocí zajišťovacích kolíků.

Krok 3. Připevněte nohy (C) do spodních otvorů středních částí rámu (A) pomocí zajišťovacích kolíků. Obě nohy musí být nastaveny na stejnou výšku.

Krok 4. Vložte horní rám (G) do horních otvorů středního rámu (A) a zajistěte jej zajišťovacími sponami (F) na obou stranách. Ujistěte se, že jsou ve stejné výšce.

Krok 5. Připevněte madlo k rámu postele a utáhněte popruh (obrázek 1).

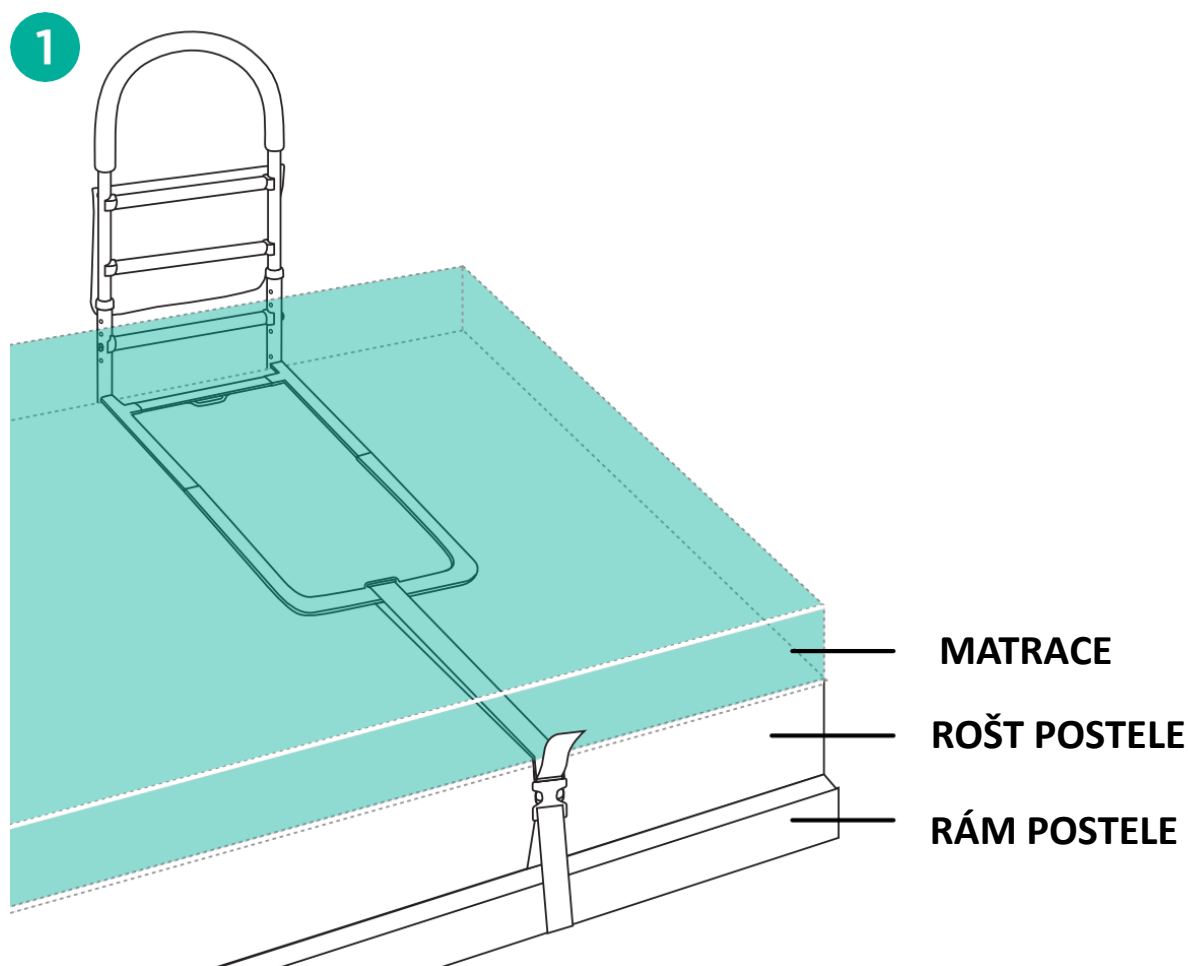

Krok 6. Ujistěte se, že se obě nohy dotýkají země. Pokud ne, upravte jejich výšku pomocí zajišťovacích kolíků.

Krok 7. Připevněte tašku pod rukojeť na horním rámu (G) pomocí klipů připevněných k tašce.

Postelové madlo je připraveno k použití.

NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETÍ A NOH

- Pro nastavení rukojeti vyjměte zajišťovací spony na obou stranách a nastavte výšku podle potřeby. Poté ji opět zajistěte sponami. Rukojeti musí být ve stejné výšce na obou stranách.
- Pro nastavení nohou stiskněte zajišťovací kolíky umístěné na nohou a zvolte odpovídající výšku. Obě nohy musí být nastaveny na stejnou výšku.

4. Technické údaje

Celkový rozsah nastavení výšky	89,5–112 cm
Celková šířka	37 cm
Celková hloubka	74 cm
Výškové nastavení rukojeti*	52–60 cm
Délka popruhu	192 cm
Výška spodního rámu od země	30–55 cm
Maximální nosnost	136 kg

* měřeno od spodního rámu po rukojeť

5. Poznámky

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních předpisů nebo použití v rozporu s účelem použití.

6. Údržba

Rám a tašku pravidelně čistěte vlhkým hadříkem bez použití chemikálií. Důkladně osušte. Odolné skvrny na tašce lze odstranit houbičkou.

7. Podmínky skladování a přepravy

Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

8. Informace o záruce

Všechny produkty distribuované naší společností jsou kryty zárukou, jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listu dostupném na našich webových stránkách. Kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mějte prosím

na paměti, že pro uplatnění záruky je nutné uchovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

9. Označení

	Referenční číslo		Výrobce
	Číslo šarže (LOT)		Kód UDI
	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Poznámka		Přečtěte si, prosím, návod k použití.
	Výrobce provedl posouzení shody se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Naši kompletní nabídku produktů naleznete u našich distributorů. Více informací na **www.timago.com**. Děkujeme vám, že jste si vybrali Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025(I)